



senectovia®



Wechseldrucksystem für Dekubitus-
Prophylaxe und -Therapie

NoDec A™

senectovia medizinaltechnik

Bewährtes Prinzip – neue Konstruktion

NoDec A besteht aus 17 Querzellen, die in regelmässigen Zyklen mit Luft gefüllt und wieder entleert werden. Zwei Längszellen sind ständig mit Luft gefüllt und garantieren die seitliche Stabilität. Statikschaltung für zwei Stunden mit automatischer Rückstellung in den Wechseldruck.

Als Matratzen-Ersatz oder -Auflage 1

Mit der optional erhältlichen Schaumstoffeinlage kann NoDec A auch ohne Bettmatratze verwendet werden. Hierzu kann die Unterseite von NoDec A an drei Seiten durch Reissverschlüsse leicht geöffnet und die Einlage einfach in das System integriert werden.

Gemäss Bettgitternorm 2

Wird NoDec A als Matratzen-Ersatz mit Schaumstoffeinlage im Bett mit Seitengitter verwendet, erfüllt das System die Bettgitternorm gemäss DIN EN ISO 1970. Die rutschfeste Befestigung des Systems am Bett erfolgt mit starken Gurten.

Selbsterklärendes Display 3


Der jeweilige Betriebszustand des Systems – Füllung, Wechseldruck oder Statik – wird angezeigt. Alle Funktionen werden durch ein modernes Alarmsystem mit akustischen und optischen Anzeigen kontinuierlich überwacht.

Vielseitig in der Anwendung 4

- Das System übernimmt die automatische Druckeinstellung bis zu einem Körpergewicht von 160 kg.
- Transportmodus durch selbstverschliessende CPC-Konnektoren.
- Entlüftung der Seitenstabilisatoren durch separaten CPC-Konnektor zur Mobilisation.

CPR 5

Für Reanimationsmassnahmen ist eine Schnellentlüftung durch das neu entwickelte CPR-Ventil innerhalb von 15 Sekunden gewährleistet.

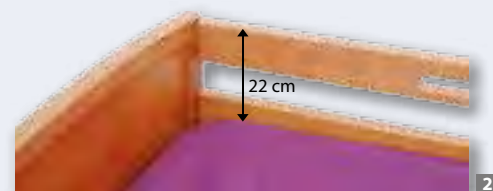

TECHNISCHE DATEN

NoDec A™

Aggregat

Abmessung (LxBxH): 29.5 x 9 x 22 cm
Gewicht: 2.5 kg
Zyklusdauer: 10 Min.
Pumpleistung: 8 Liter pro Min.
Netzanschluss: 230 Volt / 50 Hz
Stromaufnahme: 0.5 Amp. / 70 Watt
Garantie: 24 Monate

Matratze

Abmessung ohne/mit Schaumstoffeinlage:
– ohne (LxBxH): 200 x 85 x 12 cm
– mit (LxBxH): 200 x 85 x 16 cm
Material: Polyester mit Polyurethan
Gewicht*: 5.5 kg
Patientengewicht: bis 160 kg
Garantie: 24 Monate

* ohne Schaumstoffeinlage

HOTLINE: 044 735 35 44



senectovia
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40
www.senectovia.ch info@senectovia.ch

CE