




SENECTOVIA  
**one**

senectovia medizinaltechnik

## Produktmerkmale

- Grosszelliges Wechseldrucksystem bestehend aus 17 modular aufgebauten 130 mm hohen Luftzellen aus Polyurethan beschichtetem Nylon und eingenähter 50 mm hoher Schaummatratze.
- 3 statische Zellen im Kopfbereich.
- Angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen) im Rücken- und Gesässbereich.
- Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung.
- Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Tex™: Atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges.
- Umlaufender Reissverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern.
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit „Soundless-Air-Room-Technologie™“.
- Sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren.
- Abknicksichere Luftzufuhrschläuche.
- Einfache Einstellung der Patientengewichte von 40 bis 110 kg mittels Drehknopf.
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden.
- Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck.
- Luftbefüllt sind die Luftzellen 130 mm hoch. Es ermöglicht ein optimales Einsinken des Patienten.
- Durch die so vergrösserte Auflagefläche erreicht die SENECTOVIA one eine effektive Druckentlastung.
- Verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR-Netzkabel.

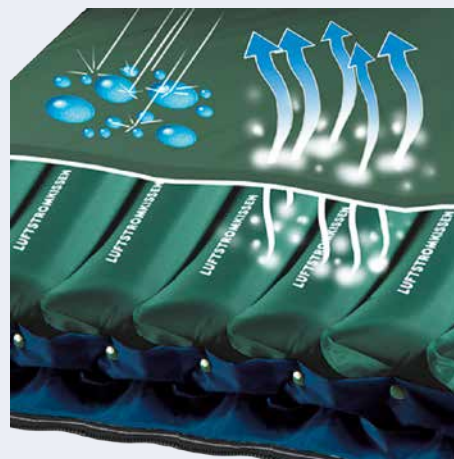

## TECHNISCHE DATEN

# SENECTOVIA one

### Matratze

Steuereinheit:	230 V / 50 Hz	Abmessung (LxBxH)
Leistungsaufnahme:	10 Watt	– Aggregat: 300 x 250 x 130 mm
Zyklus:	10 Min. 1 in 2	– Auflage: 2000 x 900 x 180 mm



senectovia®

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
www.senectovia.ch info@senectovia.ch




# SenPro

senectovia medizinaltechnik

## Produktmerkmale

- Grosszelliges Wechseldrucksystem bestehend aus 17 modular aufgebauten 130 mm hohen Luftzellen aus reinem Polyurethan (PU) und einer eingenähten 50 mm hohen Schaummatratze.
- 3 statische Zellen im Kopfbereich.
- Angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen) im Rücken- und Gesässbereich.
- Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung.
- Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Text™: Atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges.
- Umlaufender Reissverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern.
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation.
- Nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit «Soundless-Air-Room-Technologie™»
- Sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren.
- Einfache Einstellung der Patientengewichte von 40 bis 135 kg mittels Drehknopf.
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden.
- Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck.
- Luftbefüllt sind die Luftzellen 130 mm hoch. Es ermöglicht ein optimales Einsinken des Patienten.
- Durch die so vergrösserte Auflagefläche erreicht die SenPro eine effektive Druckentlastung.
- Verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR-Netzkaabel.

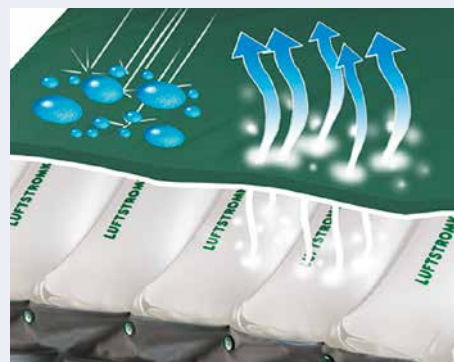

## TECHNISCHE DATEN

### Matratze

Steuereinheit: 230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 20 Watt  
Zyklus: 10 Min. 1 in 2

Abmessungen:  
– Aggregat (HxBxT): 250 x 300 x 130 mm  
– Auflage (LxBxH): 2000 x 900 x 180 mm

# SenPro



senectovia®

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
www.senectovia.ch info@senectovia.ch




3 in 1 System

SenPro 3

## Produktmerkmale

- Taste für maximale Füllung der Matratze vereinfacht die Pflege. Nach 20 Minuten schaltet das SenPro3 automatisch in den zuvor eingestellten Modus zurück.
- 3 in 1 System, das heisst, 1 Zelle ist entleert und 2 Zellen gefüllt. Dadurch erreicht man eine sehr gute Druckentlastung, kombiniert mit hohem Patientenkomfort.
- Grosszelliges Wechselluftsystem bestehend aus 17 modular aufgebauten 130 mm hohen Luftzellen aus reinem Polyurethan (PU) und einer eingenähten 50 mm hohen Schaummatratze.
- 3 statische Zellen im Kopfbereich.
- Angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen) im Rücken- und Gesässbereich.
- Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung.
- Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Tex™: Atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges.
- Umlaufender Reissverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern.
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation.
- Nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit «Soundless-Air-Room-Technologie™».
- Sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren.
- Einfache Einstellung der Patientengewichte von 20 bis 140 kg.
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden.
- Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck.
- Luftbefüllt sind die Luftzellen 130 mm hoch.
- Durch die vergrösserte Auflagefläche erreicht die SenPro3 eine effektive und optimale Druckentlastung.
- Verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR-Netzkabel.

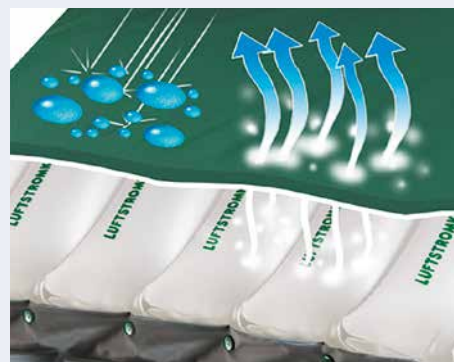

## TECHNISCHE DATEN

### Matratze

Steuereinheit: 230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 20 Watt  
Zyklus: 3 in 1

Abmessungen:  
– Aggregat (HxBxT): 250 x 300 x 130 mm  
– Auflage (LxBxH): 2000 x 900 x 180 mm  
*Auf Wunsch in verlängerter Ausführung erhältlich (2200 mm)*

# SenPro3



senectovia®

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
www.senectovia.ch info@senectovia.ch